

第2弾

夏キャンペーン

10xGenomics・Olink 認証サービスプロバイダーが、最先端のシングルセル・空間解析を期間限定の特別価格でご提供します。記載のないサービスも特価で対応いたします。(価格は税別)

キャンペーン期間

7月1日から
9月30日まで

サンプル提出期限は10月30日

空間的遺伝子発現・タンパク質解析

Xenium Prime 5K

超高解像度・高感度な空間的遺伝子発現解析。
2試験以上でさらにお得。

ヒト・マウス FFPE・凍結

-88万円
通常価格 448万円 → **360**
万円/2スライド

シングルセル解析

GEM-X Flex v2

固定化試薬で凍結組織・多検体の同時解析に対応。
品質チェック無償。20.5万円~/サンプル。
基本料金40万円+1-plex18万円

※ 1~16plex でキャンペーン価格を適用。
組織分散・細胞固定等のオプションも一律2割引き承ります。

112
万円/4サンプル

Visium HD WT

実績あるVisium (10x Genomics) の高解像度版。
切片作製・スライド貼り付け・品質チェック*込み。
Visium HD 3' もお問い合わせください。

ヒト・マウス FFPE・凍結・固定凍結

* サンプル品質チェック (DV200) の対象は解析ブロックのみ
H&E染色標本作製費用等は別に申し受けます

190
万円/2スライド

3' RNA-seq OCM 2/4-plex

On Chip Multiplex (OCM) で
3'・5'でも最大約2万細胞/ランを
2~4検体に分割。

-11万円
通常価格 96万円 → **85**
万円/1ラン

3' RNA-seq

シングルセル遺伝子発現。
最大約2万細胞/ラン。

-17.5万円
通常価格 92.5万円 → **75**
万円/1サンプル

MACSima^{NEW}

マルチプレックス空間的タンパク質解析。
抗体追加可。解析領域上限75mm²

癌免疫パネル16色 ヒトFFPE

-9.3万円
通常価格 47.8万円 → **38.5**
万円/1スライド

バルクRNA-seq 定量解析込み*
シーケンサー選択・rRNA除去・RNA抽出に対応**

国内 NovaSeq X

PE150・6Gb

4サンプルから

-6,000円
通常価格 30,000円 → **24,000**
円/1サンプル

海外 DNBSEQ-T7

PE150・6Gb

4サンプルから

-5,500円
通常価格 27,500円 → **22,000**
円/1サンプル

* 定量解析未対応の生物種・サンプルもございます。
human/mouse 以外はリファレンス作製料 (50,000円) が別途必要です。
** 別途オプション料金が必要です。

Olink® Reveal/HT (海外・human 血清/血漿)

Olink Reveal

1,000抗原を同時測定。

相乗り ヒト 10サンプルから

35,000
円/1サンプル

Olink Explore HT

5,400抗原を同時測定。

相乗り ヒト 24サンプルから

120,000
円/1サンプル


最適な解析プラットフォームをご提案します

より強力なサンプル QC ステップを導入し、**解析前に正確な実施判断が可能**。プラットフォーム間の比較を自社で実施し、実際の運用経験や社内比較解析結果に基づき、最適な解析方法の選択をサポートいたします。

SPATIAL 空間的遺伝子発現解析の比較

	Xenium In Situ in situ 蛍光検出		Visium HD NGS ベース	
	v1	Prime	WT	3'
サンプルタイプ	FFPE・凍結（Fresh Frozen）		FFPE・固定凍結・凍結	凍結
生物種	ヒト・マウス・その他 ※ その他の場合、カスタムプローブの作成が必要		ヒト・マウス	Poly (A) tail を有する生物種
解析遺伝子数	< 500	約 5,000	18,000（ヒト） 19,000（マウス）	全トランスクリプトーム
追加遺伝子数	ヒト・マウスパネル 最大100 フルカスタム 最大480		任意の数可能	
解像度	30 nm		2 μm	
検出方法	mRNA に hybridize させたプローブをその場で増幅し蛍光で検出		プローブを mRNA にハイブリッド後、増幅し NGS で検出	mRNA を polyA 鎖を介して捕捉し発現遺伝子を検出
感度	シングルセルと同等	v1 の 1/3程度	Xenium v1 の 1/10 程度	
解析面積 / スライド	10.45 × 22.45 mm ²		6.5 × 6.5 mm ² 11 × 11 mm ²	6.5 × 6.5 mm ²
おすすめの目的例	・ 大きな切片や多数のサンプル ・ RNA 品質が低め		・ 未知の変動遺伝子の探索	
	・ ターゲット遺伝子が既知	・ 未知の変動遺伝子の探索		

検出感度比較（同一ブロック）

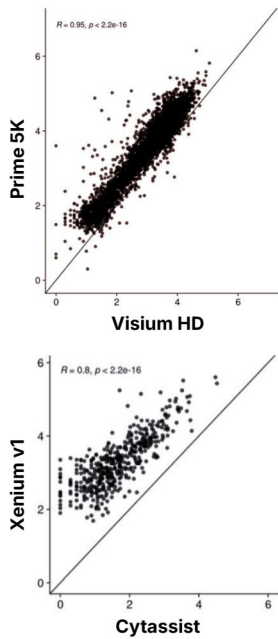

社内データの例。同一ブロックから Xenium・Visium で解析を実施。各ドットは同一遺伝子の発現を示し、**Xenium の感度の高さ**がわかる。

SINGLE CELL シングルセル解析の比較

	Universal 3' 遺伝子発現 3' シングルセル RNA-seq	Universal 5' 遺伝子発現 5' シングルセル RNA-seq	GEM-X Flex 遺伝子発現 Flex v1/v2
サンプルタイプ	生細胞・核		固定細胞・固定核
生物種	ヒト・マウス・その他		ヒト・マウス
最大細胞数/ラン	18,000		
検出方法	mRNA を polyA 鎖を介して捕捉し発現遺伝子を検出		標的遺伝子へのプローブで発現遺伝子を検出（全トランスクリプトーム）
Multiplex 対応	On Chip Multiplex / Hashtag 抗体		16-plex（v1） / 384-plex（v2）まで対応可
おすすめのサンプル例	・ ヒトやマウス以外の生物種（含 植物細胞 / プロトプラスト） ・ 細胞数が少ないサンプル	・ 免疫レパトア解析を実施するサンプル（PBMC / TIL など） ・ 細胞数が少ないサンプル	・ 液体窒素保管した組織や FFPE サンプル ・ 多検体を処理するプロジェクト ・ 全血固定サンプル


細胞数が少ない場合の **出張実験対応**や、特殊な動物・植物も実績有り。固定細胞の解析は **より強力なサンプル QC ステップ**を導入し解析前の検体差し替えが可能。解析の難しい **顆粒球 / 好中球**の解析、**ウイルス感染細胞のレパトア解析**などプロトコル開発。まずはご相談ください。

BIOINFORMATICS バイオインフォマティクス解析

バルク RNA-seq・シングルセル・空間解析（料金別途）

シングルセル・Visium・Xenium にもバイオインフォマティクス解析を行えます。サンプルのデータ統合・ヒートマップ・Celltyping・変動遺伝子解析・GO 解析を含みます。バルク RNA-seq は **クラスタリング解析**や **GO 解析**まで標準です。

左図：クラスタリング解析（バルク）
右図：Celltyping（シングルセル）

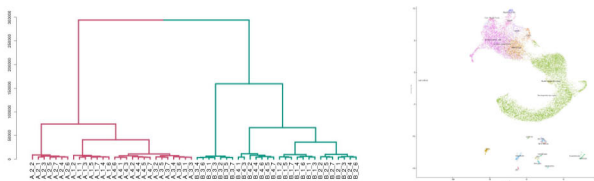

お問い合わせ

新サービスのご案内

Atera In Situ（10x Genomics）導入予定 — 高解像度・高感度な全トランスクリプトーム解析。サービス開始時期等は未定です。詳しくはお問い合わせください。

※本チラシに記載の会社名・商品名等は各社の商号および登録済みまたは未登録の商標です。
※内容は予告なく変更することがあります。※価格は全て税別です。

代理店記入欄